

# ESTELITE ASTERIA

## Custom Shade Guide



Fig. 1

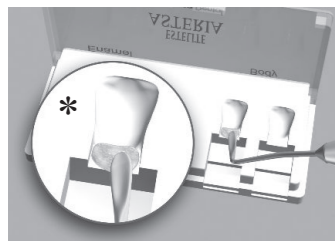


Fig. 3

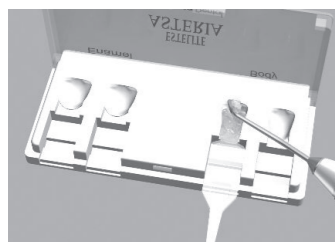


Fig. 5



Fig. 7

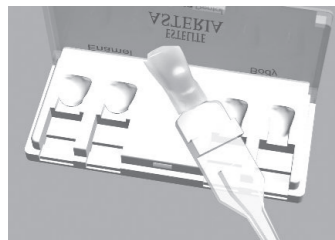


Fig. 9

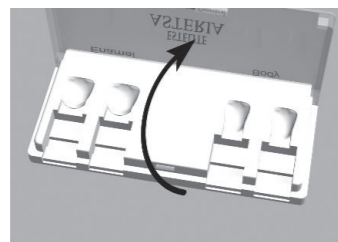


Fig. 2

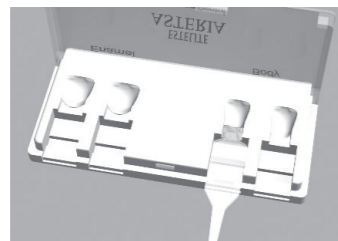


Fig. 4

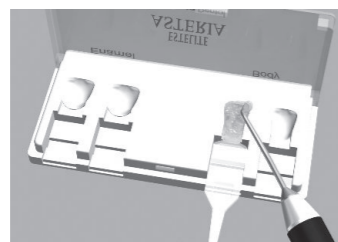


Fig. 6



Fig. 8

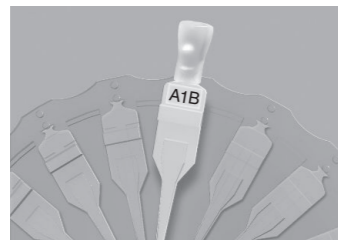


Fig. 10

### ENGLISH

ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide is a shade guide kit for making your own custom shade guides. ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide consists of the following items.

Item	Material	Quantity
A. Holder	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) resin	1
B. Shade Guide Handle	Polypropylene	15
C. Mold	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) resin	1

### HOW TO USE

Fig. 1. Select the Mold.

The Mold has two types of tooth shapes. The left side molds are wide and shallow. These are suitable for Enamel shades. The right side molds are narrow and deep. These are suitable for Body shades.

Fig. 2. Flip up the cover cap of the Mold.

Fig. 3. Before setting the Shade Guide Handle into the appropriate slot, fill the root portion\* of tooth shaped mold with ESTELITE ASTERIA resin paste using an instrument to anchor the Handle to the resin.

Fig. 4. Insert the Handle with its flat side up until it seats in completely and is flush with the Mold surface.

Fig. 5. Fill up the remaining portion of the tooth Mold with ESTELITE ASTERIA resin paste.

Fig. 6. Remove excess paste and flatten the surface.

Fig. 7. Close the cover cap and press down firmly to squash the resin paste.

Fig. 8. Light irradiate for 10 sec. (A4B shade: 20 sec.) through the cover cap.

Fig. 9. Re-open the cover cap and remove the Handle from the Mold. Trim side resin flashes, as needed.

Fig. 10. Set the finished Handle (Individual Shade) in the Holder.

### NOTICE FOR USE OF THE ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE

1. Keep the ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide away from direct sunlight to prevent a change in color.
2. Refer to the following table when cleaning the ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide.

	Cleaning method
Correct	- wash with soap and water - ultrasonic cleaning while immersed in water - immerse in a 3% glutaraldehyde solution - wipe with a cotton swab soaked in an alcohol (70%) solution
Incorrect	- autoclave <sup>1)</sup> - dry heat sterilization <sup>1)</sup> - immerse in an alcohol (70%) solution <sup>2)</sup> - immerse in a sodium hypochlorite solution <sup>3)</sup> - immerse in a hydrogen peroxide solution <sup>3)</sup>

- 1) Shade Guide Handle, Holder and Mold will melt.
- 2) Holder and Mold will whiten and crack.
- 3) Individual Shade may discolor.

### FRANÇAIS

Le nuancier ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide est un nuancier vous permettant de personnaliser vos teintes. Le nuancier ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide comprend les éléments suivants.

Élément	Matière	Quantité
A. Support	Résine ABS (Acrylonitrile-Butadiène-styrène)	1
B. Palette du nuancier	Polypropylène	15
C. Moule	Résine ABS (Acrylonitrile-butadiène-styrène)	1

### MODE D'EMPLOI

Fig. 1. Sélectionnez le moule.

Le moule comporte deux types de formes de dents. Les moules côté gauche sont larges et peu profonds. Ils conviennent aux teintes émail. Les moules côté droit sont étroits et profonds. Ils conviennent aux teintes body.

Fig. 2. Faites basculer vers le haut le couvercle du moule.

Fig. 3. Avant de placer la palette du nuancier dans la fente appropriée, remplissez de résine ESTELITE ASTERIA la partie racine\* du moule en forme de dent avec un instrument pour que le nuancier soit ancré dans la résine.

Fig. 4. Insérez complètement la palette côté plat jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que la surface du moule.

Fig. 5. Remplissez la partie restante du moule dentaire avec de la résine ESTELITE ASTERIA.

Fig. 6. Retirez l'excès de pâte et aplatissez la surface.

Fig. 7. Fermez le couvercle et enfoncez fermement pour écraser la résine.

Fig. 8. Irradiez à la lumière pendant 10 sec. (Teinte A4B : 20 sec.) à travers le couvercle.

Fig. 9. Ouvrez de nouveau le couvercle et retirez la palette du moule. Ébarbez, si nécessaire, les bavures latérales de résine.

Fig. 10. Remettez la palette terminée (teinte individuelle) dans le support.

### NOTICE D'EMPLOI DU NUANCIER ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE

1. Conservez le nuancier ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide à l'abri de la lumière solaire pour éviter tout changement de couleur.
2. Consultez le tableau suivant lorsque vous nettoyez le nuancier ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide.

	Méthode de nettoyage
Correcte	- lavage à l'eau et au savon - nettoyage ultrasonique avec immersion dans de l'eau - immersion dans une solution à 3 % de glutaraldéhyde - essuyage avec un tampon de coton imbibé d'une solution d'alcool (70 %)
Incorrecte	- autoclave <sup>1)</sup> - stérilisation à l'air chaud <sup>1)</sup> - immersion dans une solution d'alcool (70 %) <sup>2)</sup> - immersion dans une solution d'hypochlorite <sup>3)</sup> - immersion dans une solution de dioxyde d'hydrogène <sup>3)</sup>

- 1) La palette du nuancier, le support et le moule fondraient.
- 2) Le support et le moule blanchiraient et se fissureraient.
- 3) La teinte individuelle pourrait se décolorer.

### DEUTSCH

ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide ist ein Farbtonpaletten-Kit zur Anfertigung Ihrer eigenen spezifischen Farbtonpaletten. ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide besteht aus den folgenden Elementen.

Element	Material	Menge
A. Halter	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	1
B. Farbtonpaletten-Griff	Polypropylen	15
C. Form	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	1

### ANWENDUNG

Fig. 1. Wählen Sie die Form.

Die Form verfügt über zwei Typen von Zahnformen. Die Formen auf der linken Seite sind breit und flach. Sie eignen sich für Zahnschmelzfarben. Die Formen auf der rechten Seite sind schmal und tief. Sie eignen sich für Körperfarben.

Fig. 2. Klappen Sie die Abdeckklappe der Form nach oben.

Fig. 3. Bevor Sie den Farbtonpaletten-Griff in den entsprechenden Schlitz stecken, füllen Sie den Wurzelbereich\* der zahnförmigen Form mithilfe eines Instruments mit ESTELITE ASTERIA Kunststoffpaste, damit der Griff mit dem Kunststoff verankert wird.

Fig. 4. Setzen Sie den Griff mit seiner flachen Seite nach oben vollständig in die Form ein, so dass er bündig mit der Oberfläche der Form abschließt.

Fig. 5. Füllen Sie den restlichen Bereich der Zahnform mit ESTELITE ASTERIA Kunststoffpaste auf.

Fig. 6. Entfernen Sie überschüssige Paste und glätten Sie die Oberfläche.

Fig. 7. Schließen Sie die Abdeckklappe und drücken Sie diese fest herunter, um die Kunststoffpaste zu zerdrücken.

Fig. 8. Licht härten Sie die Paste 10 s lang (A4B-Farben: 20 s) durch die Abdeckklappe.

Fig. 9. Öffnen Sie die Abdeckklappe wieder und nehmen Sie den Griff aus der Form. Entfernen Sie gegebenenfalls die seitlichen Kunststoffgrate.

Fig. 10. Setzen Sie den fertiggestellten Griff (Individueller Farbton) in den Halter.

### GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEN ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE

1. Halten Sie den ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide vor direktem Sonnenlicht geschützt, um Farbänderungen zu vermeiden.
2. Gehen Sie zur Reinigung des ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide anhand der nachfolgenden Tabelle vor.

	Reinigungsmethode
Richtig	- Waschen mit Seife und Wasser - Ultraschallreinigen, während in Wasser eingetaucht - Eintauchen in 3 %ige Glutaraldehyd-Lösung - Abwischen mit einem mit Alkohollösung (70 %) getränktem Baumwolltupfer
Falsch	- Autoklavieren <sup>1)</sup> - Heißluftsterilisieren <sup>1)</sup> - Eintauchen in Alkohollösung (70 %) <sup>2)</sup> - Eintauchen in Natriumhypochlorit-Lösung <sup>3)</sup> - Eintauchen in Wasserstoffperoxyd-Lösung <sup>3)</sup>

- 1) Farbtonpaletten-Griff, Halter und Form werden schmelzen.
- 2) Halter und Form werden ausbleichen und reißen.
- 3) Der individuelle Farbton kann verfärben.

### ESPAÑOL

ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide es un kit guía de colores para preparar su propia guía de tonos personalizados. ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide consta de los siguientes elementos.

Elemento	Material	Cantidad
A. Soporte	Resina ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)	1
B. Paleta de colores	Polipropileno	15
C. Molde	Resina ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)	1

### INSTRUCCIONES DE USO

Fig. 1. Seleccione el molde.

El molde tiene dos tipos de formas de dientes. Los moldes del lado izquierdo son anchos y poco profundos. Convienen a los tonos del esmalte. Los moldes del lado derecho son estrechos y profundos. Convienen a los tonos del cuerpo (dentina).

Fig. 2. Levante la tapa del molde.

Fig. 3. Antes de insertar la paleta de la guía de colores en la ranura apropiada, rellene la parte de la raíz\* del molde en forma de diente con la pasta de resina ESTELITE ASTERIA usando un instrumento para fijar la paleta a la resina.

Fig. 4. Inserte la paleta por el lado plano hasta que encaje completamente y esté al mismo nivel que la superficie del molde.

Fig. 5. Rellene la parte restante del molde dental con la pasta de resina ESTELITE ASTERIA.

Fig. 6. Retire el exceso de pasta y alise la superficie.

Fig. 7. Cierre la tapa y presione firmemente para aplastar la pasta de resina.

Fig. 8. Irradie con la luz durante 10 segundos (Tono A4B: 20 s) a través de la tapa.

Fig. 9. Levante de nuevo la tapa y retire la paleta del molde. Recorte las rebabas de resina de los bordes si es necesario.

Fig. 10. Coloque la paleta finalizada (tono individual) en el soporte.

### NOTA PARA EL USO DE ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE

1. No exponga ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide a la luz solar directa para evitar cambios de coloración.
2. Consulte la siguiente tabla a la hora de limpiar ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide.

	Método de limpieza
Correcto	- lavado con agua y jabón - limpieza con ultrasonidos manteniendo la guía sumergida en agua - inmersión en una solución de glutaraldehído al 3% - limpieza con un bastoncillo de algodón empapado en una solución de alcohol (70%)
Incorrecto	- autoclave <sup>1)</sup> - esterilización por aire caliente seco <sup>1)</sup> - inmersión en una solución de alcohol (70%) <sup>2)</sup> - limpieza inmersión en una solución de hipoclorito de sodio <sup>3)</sup> - inmersión en una solución de peróxido de hidrógeno <sup>3)</sup>

- 1) La paleta de la Guía de Colores, el Soporte y el Molde fundirían.
- 2) El Soporte y el Molde se blanquearían y agrietarían.
- 3) El tono individual podría descolorarse.

### ITALIANO

ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide è un kit che consente di personalizzare la scala colori. ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide comprende i seguenti elementi.

Elemento	Materiale	Quantità
A. Supporto	Resina ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene)	1
B. Palette dei Colori	Polipropilene	15
C. Stampo	Resina ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene)	1

### ISTRUZIONI PER L'USO

Fig. 1. Selezionare lo stampo.

Sullo stampo sono presenti due tipi di forma di denti. Gli stampi sul lato sinistro sono larghi e poco profondi, sono adatti ai colori Smalto. Gli stampi sul lato destro sono stretti e profondi, sono adatti ai colori Corpo.

Fig. 2. Aprire il coperchio dello Stampo con un movimento verso l'alto.

Fig. 3. Prima di porre la Palette dei Colori nell'apposito spazio, riempire la zona cervicale\* dello stampo a forma di dente con il composito ESTELITE ASTERIA utilizzando uno strumento per fissare la Palette alla resina.

Fig. 4. Inserire la Palette con la parte piatta verso l'alto finché sedili e completamente a filo con la superficie dello stampo.

Fig. 5. Riempire la parte restante dello Stampo dentale con il composito ESTELITE ASTERIA.

Fig. 6. Rimuovere l'eccesso di pasta e appiattare la superficie.

Fig. 7. Chiudere il coperchio e premere fermamente per schiacciare il composito.

Fig. 8. Irradiare con la luce per 10 sec. (Colore A4B: 20 sec.) attraverso il coperchio.

Fig. 9. Riaprire il coperchio e rimuovere la Palette dallo Stampo. Eliminare eventuali sbavature laterali di resina.

Fig. 10. Riporre la Palette terminata (con la personalizzazione del colore) nel Supporto.

### NOTA PER L'USO DI ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE

1. Conservare ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide al riparo dalla luce del sole per prevenire modifiche dei colori.
2. Consultare la tabella seguente quando si effettua la pulizia di ESTELITE ASTERIA Custom Shade Guide.

	Metodo di pulizia
Corretto	- lavare con acqua e sapone - effettuare pulizia a ultrasuoni durante immersione in acqua - immergere in una soluzione di glutaraldeide al 3% - asciugare con un tampone di cotone imbevuto con una soluzione di alcol (70%)
Errato	- autoclave <sup>1)</sup> - sterilizzazione ad aria calda secca <sup>1)</sup> - immersione in una soluzione di alcol (70%) <sup>2)</sup> - immersione in una soluzione di sodio ipoclorito <sup>3)</sup> - immersione in una soluzione di perossido di idrogeno <sup>3)</sup>

- 1) La Palette della Guida Colori, il Supporto e lo Stampo si fonderebbero.
- 2) Il Supporto e lo Stampo si sbiancherebbero e si fissurerebbero.
- 3) Il campione di colore potrebbe scolorirsi.

