

Impregneurs PREDPOST+

FR Notice d'utilisation impregneurs PREDPOST+

Description produit

L'impregneur est un dispositif permettant l'enduction homogène des tenons PREDPOST+. L'impregneur est en matériau FEP.

Indication

Utilisation dans le cadre d'une reconstitution corono-radriculaire dentaire.

Plusieurs configurations sont disponibles permettant de couvrir les différentes références de PREDPOST+.

Couleur de la gaine	Rouge	Bleu	Noir	Jaune
PREDPOST+	4	6	9	12

Contre-Indications

Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a aucune contre-indication.

Effets secondaires

Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a aucun effet secondaire.


Précaution d'emploi

- Éviter toute manipulation de l'impregneur avec les doigts.
- L'impregneur est à usage unique et ne doit pas être réutilisé.

Mode d'emploi

Après préparation de la dent selon l'état dentaire, utiliser l'impregneur comme suit afin de préparer les PREDPOST+.

Sens d'insertion de l'embout de la seringue dans l'impregneur.

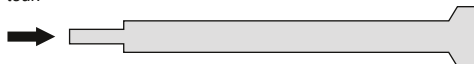

1. Insérer les PREDPOST+ dans l'impregneur.
2. Insérer le micro-applicateur sur l'embout mélangeur de la seringue. Expulser un peu de composite afin d'éliminer les bulles d'air éventuelles.
3. Insérer l'embout de la seringue dans l'ouverture de l'impregneur.
4. Retirer le PREDPOST+ de l'impregneur sur les deux tiers de sa longueur en tirant sur la gaine de préhension colorée. Ne le sortez pas complètement de l'impregneur.
5. Maintenir le PREDPOST+ en position et injecter la colle composite à l'aide de la seringue jusqu'à l'apparition de la colle du côté de la gaine de préhension.
6. Enfoncer à nouveau le PREDPOST+ dans l'impregneur en poussant sur sa gaine de préhension tout en maintenant la pression sur la seringue.
7. Relâcher le PREDPOST+ et continuer à injecter la colle composite : le PREDPOST+ sort naturellement de l'impregneur.
8. Procéder à l'assemblage et l'insertion des PREDPOST+ en se reportant à la notice du PREDPOST+.

Nettoyage et désinfection

L'impregneur est propre mais non stérile

Garantie - Limite de responsabilité

La garantie est limitée à l'aspect qualitatif du produit : tout produit défectueux sera remplacé. Le numéro de lot devra être rappelé dans toutes les correspondances qui demandent l'identification du produit.

Ce produit a été développé en vue d'une application dans le domaine dentaire et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages résultant du non-respect de ces prescriptions, d'une mauvaise manipulation ou d'une utilisation

à d'autres fins que celles indiquées dans le mode d'emploi n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur. Avant chaque utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du matériau à l'utilisation prévue. Il assume par conséquent toute la responsabilité liée à l'utilisation du produit et des dommages pouvant en découler.

Avertissement

Produit réservé exclusivement à l'usage dentaire.

Tenir hors de la portée des enfants.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur

En cas d'incidents graves, informer les autorités compétentes du pays.

L'impregneur est fabriqué en France.



Produit à usage unique.



Consulter le manuel d'utilisation.



Bio Composants Médicaux
215 Route de Bavonne
ZA le Talamud
38140 Saint Blaise du Buis - FRANCE

Date de dernière révision de la notice : 03/2021

Référence : 104001038 ed.A

Marquage CE : 2021

Distributeur :

Laboratoires PRED
79 avenue Aristide Briand
94118 Arcueil Cedex
France

EN

Instructions for use PREDPOST+ sleeves

Description of product

The sleeve is a device allowing the homogeneous impregnation of PREDPOST+. The sleeve is composed of FEP.

Indications

Using for endodontically treated teeth post and core build-up restorations.

Various sizes are available to meet all practitioners' needs.

Sheath color	Red	Blue	Black	Yellow
PREDPOST+	4	6	9	12

Contra-indications

In the current state of knowledge, there is no contra-indication.

Side effects

In the current state of knowledge, there is no contra-indication.


Precautions

- Avoid direct contact with fingers.
- The sleeve is for single use only and must not be reused.

Application

After preparing the tooth according to the dental condition, use the sleeve as follows to prepare the PREDPOST+ posts.

Direction of the micro-applicator insertion into the sheath.

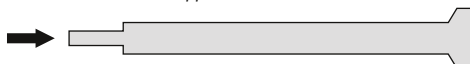

1. Insert the posts PREDPOST+ in the sleeve.
2. Insert the micro-applicator of a dual-cure luting composite onto the mixing tip. Expel some composite to remove any air bubbles.
3. Insert micro-applicator into the opening of the multi-post sleeve.
4. Pull on the sheath to uncover 1/3 of the length of the multi-post
5. Maintain the multi-post in position and inject the composite until it completely passes through the sleeve and exits.
6. Push the multi-post back into its sleeve while maintaining

pressure on the syringe.

7. Release pressure on multi-post while continuing to inject the composite, to ensure the multi-post is completely filled with composite.
8. Assemble and insert the PREDPOST+ according to PREDPOST+ instructions.

Cleaning and disinfection

- The sleeve is clean but not delivered sterile.

Guarantee – Limited liability

The guarantee is limited to the quality of the product: any defective product will be replaced. The Batch Number must be referenced in all correspondence asking to identify the product. This product has been developed for use in dentistry and must always be used according to the Directions. Any harm resulting from a failure to comply with these provisions, incorrect handling or use for purposes other than those indicated in the instructions will not be the manufacturer's responsibility. Before every use, the user is obliged to check the compatibility of the equipment with the intended application: in consequence, he or she is entirely liable for use of the product and any associated damages.

Warning

- Product use reserved for dental applications.
- Keep out of the reach of children.

Dispose of waste according to current regulations.

In the event of serious incidents, inform the competent authorities of the country.

Made in France

⊗ Single use.

📖 See the user's manual.

 Bio Composants Médicaux
215 Route de Bavonne
ZA le Talamud
38140 Saint Blaise du Buis - FRANCE

Date of the last revision of the IFU: 03/2021

Reference: 104001038 ed. A

CE marking : 2021

Distributeur:

Laboratoires PRED
79 Avenue Aristide Briand
94118 Arcueil Cedex
France

IT

Istruzioni per l'uso PREDPOST+ impregnatori

Descrizione del prodotto

L'impregnatore è un dispositivo per il rivestimento omogeneo dei perni PREDPOST+. È realizzato in FEP (etilene propilene fluorurato).

Indicazioni

Destinato all'uso nella ricostruzione dentale corono-radicolare. Sono disponibili parecchi configurazioni per coprire i diversi tipi di PREDPOST+.

Colore	Rosso	Blu	Nero	Giallo
PREDPOST+	4	6	9	12

Controindicazioni

Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono controindicazioni.

Effetti secondari

Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono effetti secondari.

Precauzione per l'uso

- Evitare di toccare l'impregnatore con le dita.
- L'impregnatore è monouso e non deve essere riutilizzato.

Istruzioni per l'uso

Dopo aver preparato il dente in base alle condizioni dentali, utilizzare l'impregnatore come indicato di seguito per preparare il PREDPOST+.

Senso di inserimento della punta della siringa nell'impregnatore



1. Inserire il PREDPOST+ nell'impregnatore.
2. Inserire il micro-applicatore sulla punta di miscelazione della siringa. Far fuoriuscire un po' di composto per eliminare eventuali bolle d'aria.
3. Inserire la punta della siringa nell'apertura dell'impregnatore.
4. Rimuovere il PREDPOST+ dall'impregnatore per due terzi della sua lunghezza tirando il manicotto colorato, ma senza estrarlo completamente.
5. Tenere il PREDPOST+ in posizione e iniettare la colla composta con la siringa fino a quando appare sul lato del manicotto.
6. Inserire nuovamente il PREDPOST+ nell'impregnatore spingendo il manicotto e continuando a premere sulla siringa.
7. Rilasciare il PREDPOST+ e continuare a iniettare la colla composta. A questo punto il PREDPOST+ uscirà naturalmente dall'impregnatore.
8. Montare e inserire il PREDPOST+ facendo riferimento alle specifiche istruzioni.

Pulizia e disinfezione

- L'impregnatore è pulito ma non sterile

Garanzia - Limiti di responsabilità

La garanzia si limita all'aspetto qualitativo del prodotto: ogni prodotto difettoso sarà sostituito. Il numero di lotto dovrà essere indicato in ogni corrispondenza che richieda l'identificazione del prodotto.

Questo prodotto è stato sviluppato per un'applicazione in ambito ortodontico e deve essere impiegato come previsto dalle istruzioni per l'uso. I danni risultanti dal mancato rispetto di tali indicazioni, da un uso improprio o per fini diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso non sono di responsabilità del fabbricante. Prima di ogni utilizzo l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, che il materiale venga utilizzato secondo l'uso previsto. Di conseguenza, si assume tutte le responsabilità legate all'uso del prodotto e ai danni che possono derivarne.

Avvertenza

Prodotto destinato esclusivamente a un uso ortodontico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire i rifiuti secondo la normativa in vigore

In caso di gravi incidenti, informare le autorità competenti del paese.

L'impregnatore è prodotto in Francia.

⊗ Prodotto monouso.

📖 Consultare le istruzioni per l'uso.

 Bio Composants Médicaux
215 Route de Bavonne
ZA le Talamud
38140 Saint Blaise du Buis - FRANCE

Data dell'ultima revisione delle istruzioni: 03/2021

Riferimento : 104001038 ed. A

Marchio CE: 2021

Distributore:

Laboratoires PRED
79 Avenue Aristide Briand
94118 Arcueil Cedex
France