



# HELIOS

Votre scanner intra-oral, Helios 600.

# Démarrez votre aventure numérique avec Helios 600 !

## Simplicité

Haute précision avec étalonnage automatique et adaptatif, l'étalonnage manuel n'est plus nécessaire.

## Performance

Un scanner précis et rapide.

## Ergonomique

Assez petit pour l'utiliser facilement, bien qu'il atteigne un champ de vision haute définition de 16 x 14 mm.





## Léger

198 grammes, il est léger, bien équilibré, ergonomique et facile à transporter.



## Rapide

Avec Helios 600, vous pouvez effectuer un scan complet de l'arcade en moins de 30 secondes.



## Intelligent

La technologie IA filtre les tissus mous et en mouvement, offrant aux utilisateurs une expérience de numérisation fluide et générant des résultats de traitement d'apparence naturelle.



## Précis

Helios 600 atteint un haut niveau de précision de 20 µm.



# Helios 600

Non seulement un scanner intra-oral complet, mais aussi une caméra intra-orale !

Deux boutons marche/arrêt sont fournis des deux côtés pour faciliter la numérisation

Lumière LED  
Sans poudre  
Anti-buée

1 seul câble avec port USB pour l'alimentation et le transfert de données




Embout de scanner amovible  
2 tailles en option

Bouton pour basculer entre la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure ou le mode morsure

Conçu pour être solide et durable

# Branchez & Scannez

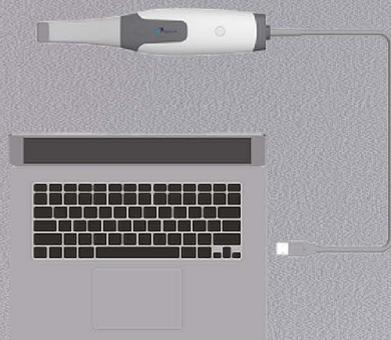

Assistance intelligente pendant le scan



Mise-à-jour automatique et gratuite




Stockage sur le cloud



Visualiseur 3D en ligne



Contrôle à distance\*

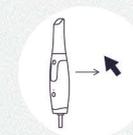

SAV rapide



Mémo vocal



\*Le mouvement du scanner peut faire pivoter le modèle 3D numérisé

## Helios 600

Précision	Arche complète	20.0µm
	Zone de numérisation	16 x 14mm (L) 12 x 12mm (S)
Pièce à main	Taille	219 x 46 x 36mm
	Poids	198g
Pointe	Bouton de capture	Deux faces
	Taille de la pointe (partie avant)	22 x 18mm (L) 18.6 x 16.7mm (S)
Connectivité	Longueur	1.8m
	Type	USB 3.0
Étalonnage	Étalonnage de précision	Sans étalonnage
	Étalonnage de couleur	Sans étalonnage
Mode spécial	Mode télécommande	Oui

## Configuration recommandée

Processeur	Processeur Intel®Core™ i7 9e génération, 2.6 GHz (ou plus)
Memoire	16 Go (ou plus) DDR4, fréquence 2666 MHz (ou plus)
Disque dur	512 Go (ou plus) SSD
Carte graphique	NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (ou mieux)
Écran	15.6" FHD (1920 x 1080) (ou mieux)
Autre	USB 3.0
Système d'exploitation	Windows 10 Pro
En option	Écran tactile
Contenu	Scanner, support pièce à main, 4 embouts réutilisables, clé USB
Réf.	HELIOS600

Spécifications



## Sélectionné et garanti par les Laboratoires PRED Qualité Precision Tech

Comme tous nos produits, Helios 600\* répond aux meilleurs standards technologiques du marché.

Testé, sélectionné et garanti par nos soins, Helios 600 est le scanner intra-oral pour votre profession.



\*Dispositif médical de classe I fabriqué par Changzhou Sifary Medical Technology Co, Ltd. Produit de santé portant le marquage CE pour utilisation dentaire uniquement. Distribué par les Laboratoires PRED.





Laboratoires PRED  
79 avenue Aristide Briand  
94118 Arcueil Cedex, France  
Tél. 01 41 98 34 00  
info@pred.fr  
www.pred.fr