



Dentisterie numérique polyvalente et confortable

# Le système Ceramill DRS pour le cabinet et le laboratoire

Ceramill DRS :

# Direct Restoration Solution

Avec le système Ceramill DRS, Amann Girrbach coche toutes les cases d'une transition fluide entre médecine dentaire et dentisterie numérique. Son utilisation est pratique, révolutionnaire et facilitée par une construction modulaire qui permet au cabinet et au laboratoire de répondre aux besoins individuels lors du processus prothétique.

Grâce à ses différents composants, il est un maillon essentiel de la collaboration interdisciplinaire entre cabinet et laboratoire tout comme les flux réalisés directement au fauteuil par le dentiste. La collaboration au cours du processus prothétique est organisée et adaptée aux besoins individuels du cabinet et du laboratoire qui profitent ainsi d'un savoir-faire partagé.



## CONNECTION KIT

 Cabinet

Scanner intra-oral, logiciel et partage des cas AG.Live avec le laboratoire pour Same Day Dentistry.

## PRODUCTION KIT

 Cabinet

Restaurations unitaires et bridges jusqu'à 3 éléments directement au cabinet au cours d'une même séance.



### Aperçu des avantages

- ✓ Collaboration transparente : laboratoire et cabinet sont connectés via la plateforme AG.Live pour un échange interdisciplinaire parfaitement fluide.
- ✓ Flexible et évolutif : les composants du système sont modulaires. En fonction des besoins, il est possible de se limiter à certains éléments ou de prévoir des extensions ultérieures.
- ✓ Satisfaction élevée du patient : soins au cours d'une même consultation ou le jour même.
- ✓ Sécurité du système : flux entièrement intégrés ou scanner intra-oral tiers validé pour une sécurité totale d'utilisation.
- ✓ Polyvalence : de nombreuses indications et un rendement élevé.

## HIGH-SPEED ZIRCONIA KIT


🏠 Cabinet | 🏭 Laboratoire

Frittage de l'oxyde de zirconium en 20 minutes seulement avec 16 teintes VITA parfaitement assorties.

Plus qu'un produit :

# Comment optimiser vos flux

Chez Amann Girrbach, nous avons la conviction que si l'efficacité des processus utilisés au cabinet et au laboratoire réside dans la performance des produits, leur connexion avec des flux numériques devrait jouer un rôle croissant à l'avenir. Avec ses différents composants, le système Ceramill DRS permet une organisation totalement individuelle du flux au cabinet et au laboratoire.

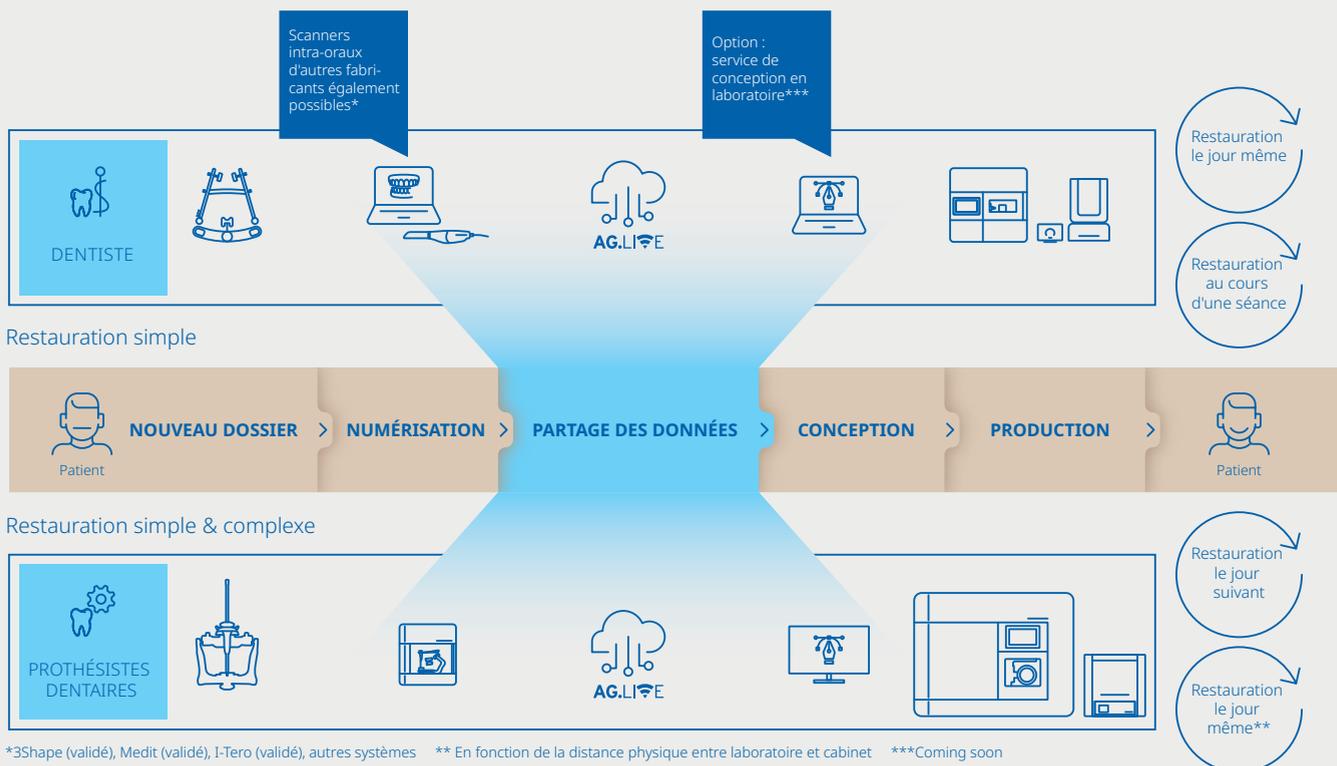

## AG.Live : au cœur du flux numérique

Clair. Central. Numérique. Pour la prise en charge de nos flux numériques et pour une mise en réseau optimale du laboratoire et du cabinet, Amann Girrbach a créé la plateforme AG.Live basée sur le cloud, qui offre une gestion des équipements et des cas avec une cohérence et une efficacité inédites. Tous les produits nouveaux et existants d'Amann Girrbach sont reliés à AG.Live afin d'assurer un flux de travail parfait et une coopération fluide entre le laboratoire et le cabinet – pour une médecine dentaire en toute simplicité.

Il est ainsi possible, par exemple, de proposer des restaurations directes de grande qualité en collaboration avec le laboratoire ou de les réaliser au cabinet dentaire directement au fauteuil. L'expertise du prothésiste est à portée de clic pour le dentiste, les processus de fabrication profitent d'une collaboration de qualité et le laboratoire peut étendre son activité à de nouveaux domaines en proposant par exemple un service de conception.



- ✓ Efficacité : portail de partage des cas et données, totalement automatisé avec plateforme réseau
- ✓ Interdisciplinaire : AG.Live connecte le cabinet et le laboratoire et assure une collaboration simple et sécurisée
- ✓ Intuitif : la création, l'administration et le traitement de cas de patients n'ont jamais été aussi simples

Ceramill DRS Connection Kit :

# L'empreinte numérique – un maillon essentiel de la collaboration



Ceramill Mv DRS



Ceramill DRS Notebook



Logiciel de numérisation



Connexion AG.Live



Ceramill Uni-Cart (option)

Le Ceramill DRS Connection Kit amène le flux numérique au cabinet dentaire. Outre le scanner intra-oral Ceramill Map DRS, le Ceramill DRS Notebook, le logiciel de numérisation et la connexion à la plateforme AG.Live basée sur le cloud, il propose tous les outils nécessaires pour la réalisation et le transfert d'empreintes numériques.


Les empreintes numériques ainsi que d'autres données (notamment photos, radios, etc.) peuvent être enregistrées sur la plateforme AG.Live basée sur le cloud et transférées rapidement au laboratoire pour traitement ou encore exploitées au cabinet même directement au fauteuil. Un cart fourni sur demande avec le Ceramill DRS Connection Kit garantit une flexibilité optimale au cabinet.

## Scanner intra-oral pour un confort maximal du patient et des séances courtes

Fichiers .ply et .stl ouverts

Léger et ergonomique, une prise en main confortable

Deux embouts de numérisation de hauteur différente, aussi en cas d'espace restreint

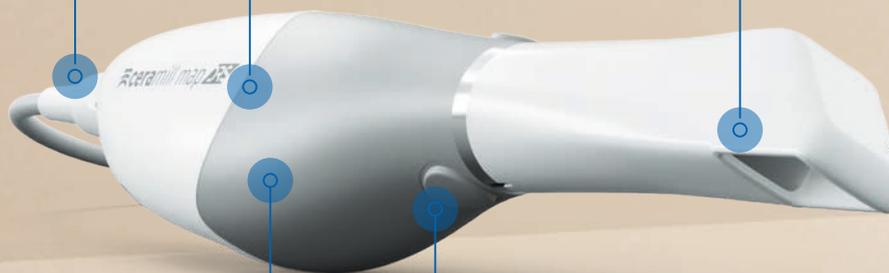

Numérisations en 3D haute vitesse pour des temps de numérisation courts

Bouton interactif pour la commande du logiciel de numérisation sans souris

Ceramill DRS Production Kit :

# Des patients satisfaits grâce à la Single Visit Dentistry



Ceramill Mind DRS




Ceramill Motion DRS



Ceramill DRS Notebook  
(chez Ceramill DRS Production Kit+)

Le Ceramill DRS Production Kit vous permet de réaliser des prothèses dentaires de qualité exceptionnelle dans votre propre cabinet. Le kit contient notre machine CNC 4 axes Ceramill Motion DRS ainsi que le logiciel de conception Ceramill Mind DRS qui permet une planification simple et intuitive de restaurations à partir des données de numérisation obtenues avec Ceramill Map DRS.

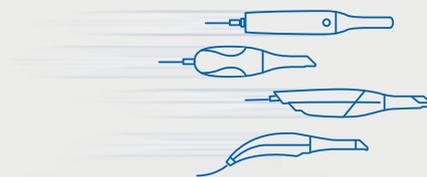

Scanners intra-oraux d'autres fabricants également possibles\*

\*3Shape (validé), Medit (validé), I-Tero (validé), autres systèmes

## Prothèse dentaire en une séance : qualité et fiabilité du processus

Stratégies rapides de fraisage validées (exemple : molaire unitaire en IPS e.max env. 15 minutes) pour une restauration finale parfaitement ajustée

Unité centrale intégrée, pendant que la machine travaille, la numérisation du patient suivant peut être lancée

Écran tactile 7" permettant de suivre les étapes de travail, de commander la machine et de réaliser la maintenance

Caméra intégrée pour assistance à distance



Machine CNC 4 axes autonome avec réservoir intégré, compresseur et magasin d'outils

Deux porte-outils RFID différents : porte-outil universel pour l'usinage des matériaux provisoires (B40 et B55) ; porte-outil DR pour l'usinage de tous les autres matériaux



Ceramill DRS Zirconia Kit :

# Frittage à vitesse élevée esthétique, rapide et sûr



Four de frittage Ceramill Therm DRS



Zolid DRS Multilayer




Composé du four de frittage Ceramill Therm DRS et du matériau Zolid DRS Multilayer, le Ceramill DRS High-Speed Zirconia Kit constitue la base parfaite pour la réalisation ultrarapide de restaurations en oxyde de zirconium très esthétiques. En 20 minutes à peine, les restaurations sont frittées et acquièrent une esthétique naturelle grâce aux 16 teintes VITA parfaitement assorties avec dégradé de teinte intégré. Grâce à l'intégration parfaite dans le flux Ceramill, le Ceramill DRS High-Speed Zirconia Kit permet à l'utilisateur en laboratoire ou cabinet de réaliser des restaurations en oxyde de zirconium pendant une même séance.

## Plus de flexibilité pour la réalisation de restaurations en oxyde de zirconium

L'élément chauffant spécial haute performance permet le frittage de couronnes individuelles en seulement 20 minutes sans perte de résistance

Commande intuitive sur l'écran tactile externe : préprogrammé pour différentes indications, mais aussi librement programmable

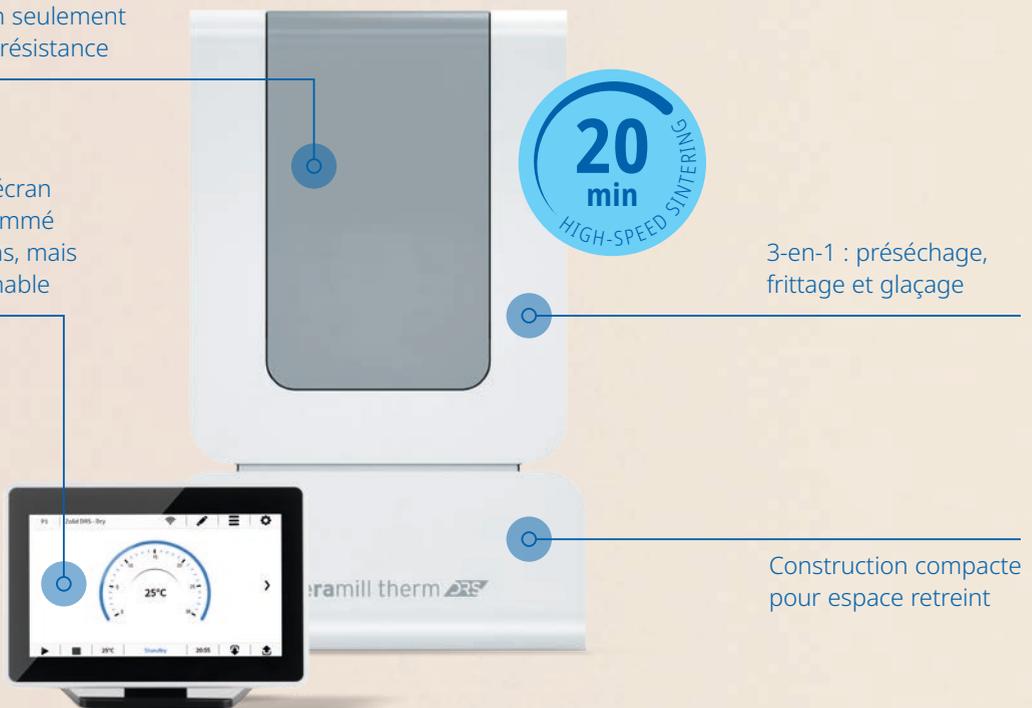

3-en-1 : préséchage, frittage et glaçage

Construction compacte pour espace retreint

## À propos d'Amann Girschbach

Pionnier des technologies CAD/CAM dans le secteur dentaire, Amann Girschbach est un leader global de l'innovation et des solutions globales pour la dentisterie prothétique numérique. Forte d'un potentiel élevé de développement et d'une stratégie axée résolument sur le client, l'entreprise crée des solutions globales sophistiquées, notamment l'écosystème logiciel AG.Live et des matériaux de grande qualité pour les flux des professionnels de demain. Ses clients internationaux répartis dans quelque 90 pays sont des laboratoires et cabinets dentaires. Amann Girschbach emploie au total environ 550 collaborateurs à travers le monde. Outre les sites de développement et production de Koblach (siège) et de Rankweil en Autriche, Amann Girschbach dispose aussi de filiales commerciales à Pforzheim (D), Vérone (IT), Jossigny (F), Charlotte (USA), Singapour (ville), Curitiba (Brésil), Pékin (Chine), ainsi que Kyoto (Japon).

En savoir plus sur Ceramill DRS : un grand choix de présentations gratuites en ligne

### Présentation en ligne :

Ceramill DRS –  
La transformation  
numérique,  
un investissement  
rentable !



Elena Bleil  
Amann Girschbach



[bit.ly/3jizIf6](https://bit.ly/3jizIf6)

### Présentation en ligne :

AG.Live – service  
360° pour votre  
infrastructure  
numérique



Christian Ermer  
Amann Girschbach



[bit.ly/3kZCYwA](https://bit.ly/3kZCYwA)

### Présentation en ligne :

Frittage à vitesse  
élevée : magique  
avec l'oxyde de  
zirconium ?



Bogna Stawarczyk  
Université Louis-et-Maximi-  
lien de Munich



[bit.ly/3HohL6X](https://bit.ly/3HohL6X)

### Aperçu du système :

Ceramill DRS –  
la solution pour les  
restaurations directes



Wibke Rosin  
Amann Girschbach



[bit.ly/3RIJGc9](https://bit.ly/3RIJGc9)