



STARZ TIPZ
5 Star Performance

UN TRAVAIL À RISQUES

Le principe de ne pas nuire au patient est le fondement de l'éthique du dentiste. La science a déjà prouvé avec certitude que les dispositifs les plus utilisés en dentisterie peuvent être les plus dangereux.

Qu'y-a-t-il dans vos seringues air/eau ? Pourquoi les traitez-vous différemment des aiguilles ou des embouts d'aspiration ?

Cette pratique double crée un risque réel de contamination croisée pour vos patients. De nombreuses études démontrent que la charge microbienne s'accumule dans la seringue et que son design nuit à la stérilisation. Si vous ne pouvez pas la nettoyer, vous ne pouvez pas la stériliser. Certains dentistes essaient de nettoyer l'intérieur sale de la seringue air/eau avec un fil orthodontique ou une lime endo. C'est clairement une solution inefficace à un grave problème.

L'embout autoclavable d'une seringue air/eau est parfaitement sûr pour le 1er patient. Mais qu'un produit soit étiqueté autoclavable, cela signifie que ses matériaux supportent les hautes températures de l'autoclave. Cela ne garantit pas la stérilisation par autoclave. Tous les organismes réglementaires dans le monde ont affirmé que si un dispositif est difficile à nettoyer, un modèle à usage unique est recommandé.

Un fait :

En 2013, les Centres américains de Surveillance des Maladies ont confirmé le 1er cas de transmission (infection croisée) d'hépatite C de patient à patient dans un cabinet dentaire.

LA RÉALITÉ DES BACTÉRIES

L'agrandissement SEM révèle une corrosion large à l'intérieur des canaux des embouts non jetables. La corrosion crée une surface rugueuse qui est un environnement idéal pour l'adhérence des microorganismes.

Plus les canaux sont longs, moins la stérilisation de l'intérieur est efficace. C'est la raison de l'arrêt de la réutilisation des aiguilles hypodermiques. En fait, les canaux d'un embout de seringue air/eau sont plus longs que ceux d'une seringue dentaire, ce qui les rend difficile à stériliser.

La vérité est que la contamination s'infiltré, et que vous ne pouvez pas la retirer ou la tuer à cause de la conception inaccessible de l'embout. Il est structurellement difficile à décontaminer.

Un fait :


Une étude spécialisée de 2014 a montré que 50% des embouts réutilisables contenaient des unités formant des colonies (UFC) bactériennes après avoir été rincées et passés à l'autoclave.

Le sang, les tissus et la salive collectés peuvent commencer à s'accumuler dans les minuscules lumens des embouts. La longueur et la finesse de ces lumens rendent le nettoyage et la stérilisation quasi impossible.



A L'INTÉRIEUR DU STARZ SYSTEM

Adaptateur 13045 Kavo K4

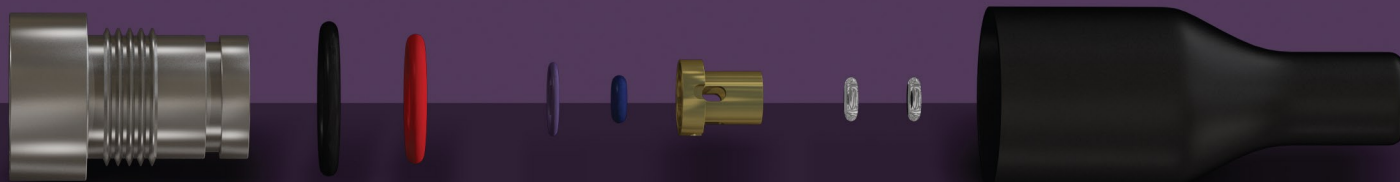

A l'intérieur du meilleur adaptateur

Conçu spécifiquement pour votre type unique de seringue, chaque adaptateur Starz est un dispositif médical précis qui combine des pièces complexes en métal et différents types de joints toriques en silicones de couleurs, afin que votre seringue puisse utiliser les embouts à haute performance et usage unique Starz Tipz.

Joint :
Permet une séparation absolue de l'air et de l'eau

Lubrification :
Permet une mise en place et un retrait faciles de l'embout.

Poignée :
Assure une fixation sûre de l'embout

Matériau du joint torique :
Sélectionné spécifiquement et autoclavable

UNE GAMME COMPLÈTE

a|dec

 **Chirana**

hekadental[®]

 **MIDMARK**

 **TAKARA
BELMONT**

 **DCI**
EQUIPMENT

 **forest
dental**

Pelton & Crane

onihos

 **CASTELLINI**

 **TARO**
SINCE 1948. EXPERIENCE
AND INNOVATION

 **Ritter Dental**
THE DENTAL EXPERTS

 **Ritter Dental**
THE DENTAL EXPERTS

 **OSADA**

 **LUZZANI DENTAL**


 **MORITA**

 **ULTRADENT**

 **sirona**
The Dental Company

- Mise à niveau immédiate pour un dispositif essentiel et souvent problématique
- Adaptation parfaite et finition qui améliore l'aspect et la performance de votre seringue
- Facile à installer par simple poussée et retrait
- Facile à utiliser - pousser l'embout - tirer l'embout

- Facile à nettoyer - la surface lisse réduit la contamination
- Autoclavable : une fois installé, n'a pas à être retiré
- Durable - composants en métal médical, joints toriques de haute qualité, finitions spéciales
- Les adaptateurs enregistrés bénéficient d'une garantie étendue à 24 mois

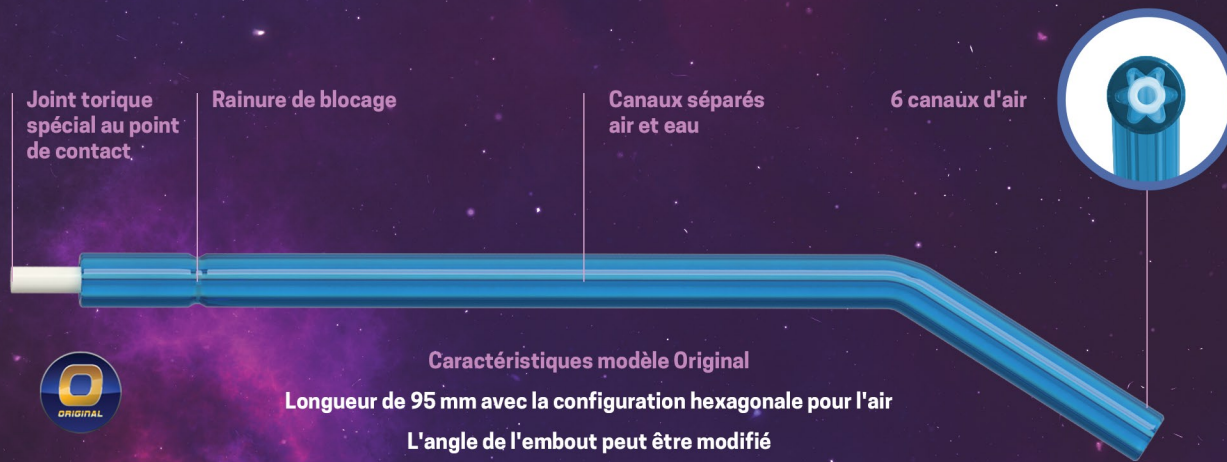

Caractéristiques modèle Original

Longueur de 95 mm avec la configuration hexagonale pour l'air

L'angle de l'embout peut être modifié

Disponible en couleur unique ou assortiment de 6 couleurs

Starz Tipz Original est préféré par les praticiens qui utilisent les seringues de style USA, comme A-dec, DCI, Forest et Heka



Bleu Saphir



Jaune Mirage



Framboise Rhodolite



Orange Citrine




Vert Jade



Violet Améthyste

Les modèles Original et HP sont interchangeables l'un l'autre, et utilisent le même adaptateur

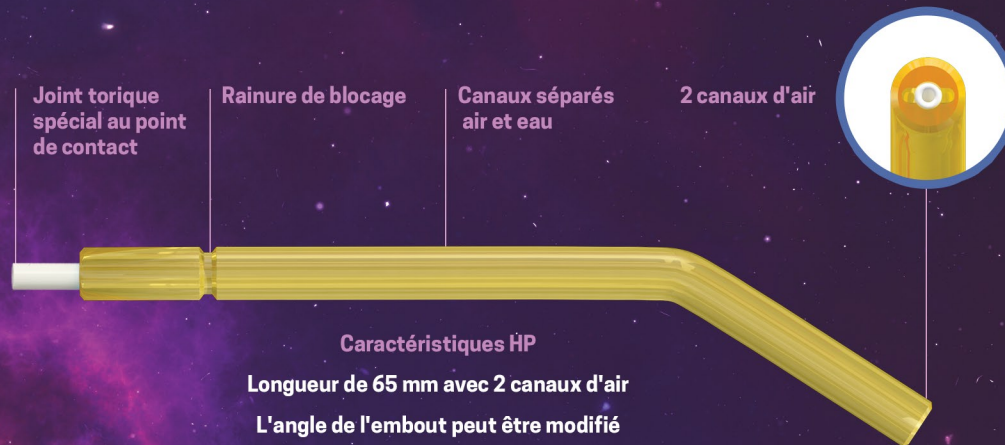

Caractéristiques HP

Longueur de 65 mm avec 2 canaux d'air

L'angle de l'embout peut être modifié

Disponible en couleur unique ou assortiment de 6 couleurs

L'embout HP accroît la pression de l'air par rapport au modèle Original

Starz Tipz HP est préféré par les praticiens qui utilisent les seringues type Euro comme Sirona, Kavo et Luzzani



Bleu Saphir



Jaune Mirage



Framboise Rhodolite



Orange Citrine



Vert Jade



Violet Améthyste

Les modèles Original et HP sont interchangeables l'un l'autre, et utilisent le même adaptateur

LA SOLUTION SERINGUE




La combinaison d'un embout à usage unique de haute qualité et d'un adaptateur durable crée un système d'embouts parfait qui produit un air sec et une réelle fiabilité

Le système peut être adapté à toute seringue air/eau en quelques secondes

Des kits de réparation permettent d'assurer la durabilité de l'adaptateur

Fiabilité, spray homogène, et meilleure hygiène

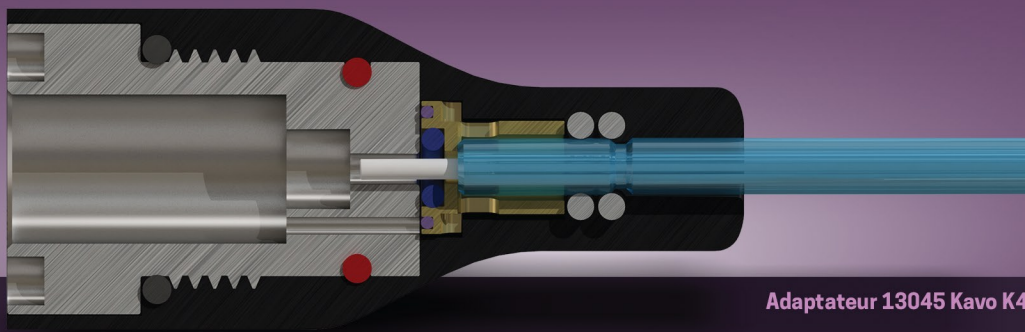

Adaptateur 13045 Kavo K4

Le système Starz Tipz est une solution validée qui réduit le risque d'infection croisée tout en améliorant la performance d'un dispositif que vous utilisez sur chaque patient. Finis les embouts sales, endommagés, ou qui fuient. Starz s'adapte vite et sans problème à la plupart des équipements d'Europe, des Etats-Unis ou du Japon. En quelques minutes, vous pouvez améliorer votre système et utiliser Starz Tipz. Et si vous n'étiez pas satisfaits, vous pouvez le retirer aussi facilement. Notre garantie de performance et notre programme de garantie étendue vous satisferont certainement pour de nombreuses années. Dans le monde entier, des dentistes choisissent Starz Tipz parce qu'ils exigent les produits de la meilleure qualité pour pratiquer la meilleure dentisterie sur leurs patients.



Jusqu'aux Starz - Le système d'embouts haute performance de la Galaxie

Prêt à l'essai ? Demander un adaptateur**

LUZZANI



Code de l'adaptateur :
13042

SIRONA



Code de l'adaptateur :
13044

IDENTIFIER MA SERINGUE :

- Prenez une photo de votre adaptateur air/eau
- Envoyez un mail avec le nom de votre cabinet, votre adresse, le téléphone et le nom de la personne à contacter à info@pred.fr

Un de nos techniciens vous indiquera de quel adaptateur vous avez besoin.

AMÉLIOREZ VOTRE SERINGUE EN QUELQUES SECONDES !



Des adaptateurs sont disponibles pour plus de modèles de seringues

*Un adaptateur d'essai par cabinet peut être fourni pour quelques jours seulement. S'il n'est pas acheté avant la fin de l'essai, il doit être retourné à PRED. Sinon, il sera facturé au prix tarif dentistes.



Luzzani MM / ML Kit de réparation

13058

Kavo K4 Kit de réparation

13060

Sirona Sprayvit C8 Kit de réparation

13059

Cefla Anthos SP Kit de réparation

13061



Starz Pak

13030 Prizm (150 Tips)
couleurs assorties

Starz Pro Pak

13062 Prizm (1500 Tips)
couleurs assorties



Starz Pak HP

13036 Prizm (150 Tips)
couleurs assorties

Starz Pro Pak HP

13064 Prizm (1500 Tips)
couleurs assorties

Pour voir les adaptateurs, les kits de réparation, et les produits Starz Tipz,
merci de visiter le site :
WWW.PRED.FR



Tel : 01 41 98 34 04

www.pred.fr

Email: info@pred.fr