

E-CONNECT*



MOTEUR ENDO SANS FIL



Modes de travail : rotation continue / réciprocité



Étalonnage du couple



Contre angle ajustable 360°



Écran OLED



ECAN - Tête miniature



Affichage ambidextre



Batterie puissante



550€**

*E-Connect est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Changzou Sifary Medical Technology Co., Ltd. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires Pred.


** Tarif TTC

NEUF PROGRAMMES DE MÉMOIRE MODIFIABLES (M1 À M9)



- Vitesse maximale 1000 rpm
- Sens de rotation avant
- Mouvement de recul de 360° dans le sens des aiguilles d'une montre
- Sens de rotation inverse
- Réglage modifiable de la vitesse et du nombre de tours par minute
- Couple Inversion automatique
- Réglage éditable du couple

TÊTE DE CONTRE-ANGLE EN UNE SEULE PIÈCE

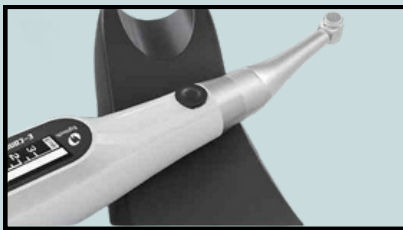

- Pièce à main réglable à 3'60
- Tête détachable
- Tête miniature
- Autoclavable

MODE DE TRAVAIL

FWD

Rotation continue dans le sens horaire

REV

Rotation continue dans le sens anti-horaire

REC

Mouvement alternatif

ATC

Contrôle de couple adaptif

CINQ MODES DE RÉCIPROCITÉ (MO)



Réciprocation inverse - un seul mode

Mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre

Avant 30° - Arrière 150°
Pour les dossiers de réciprocité

Réciprocité vers l'avant - Quatre modes

Mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse

Avance 150° - Retour 30° Avance 130° - Retour 30°
Avant 21 00 - Arrière 30° Avant 250° - Arrière 30°
Pour tous les fichiers à rotation continue