





Bien plus qu'une simple caméra



Pourquoi choisir H=LIOS6X Pro*?

- Optimise le flux de travail numérique Précision et rapidité améliorées
- Adaptée à votre budget
 Un juste rapport qualité prix
- Calibrage automatique et adaptatif
 La caméra intra-orale Hélios 6X Pro est
 immédiatement prête à l'emploi
- Expérience de numérisation confortable Petite et légère tout en offrant un large champ de vision 16mm x 14mm



*La caméra intra-orale Hélios 6X Pro est un dispositif médical de classe I fabriqué par Changzhou Sifari Medical Technology Co. Ltd. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires PRED.



Précise

Hélios 6X Pro atteint un niveau de précision de 16,0 µm



Rapide

Avec Hélios 6X Pro, vous pouvez effectuer un scan complet de l'arcade en moins de 30 secondes



Légère

Avec 161,5 grammes seulement, elle est légère, bien équilibrée, ergonomique et facile à transporter



Intelligente

La technologie IA filtre les tissus mous et en mouvement, offrant aux utilisateurs une expérience de numérisation fluide et générant des résultats de traitement d'apparence naturelle



Stimulation orthodontique

Visualisation 3D du résultat du traitement orthodontique prévu



Rapport de santé buccale

Outil IA qui facilite le diagnostic et permet d'élaborer le plan de traitement




Constructeur de modèles

Outil pour créer et personnaliser les modèles pour impression 3D





Brancher & Scanner

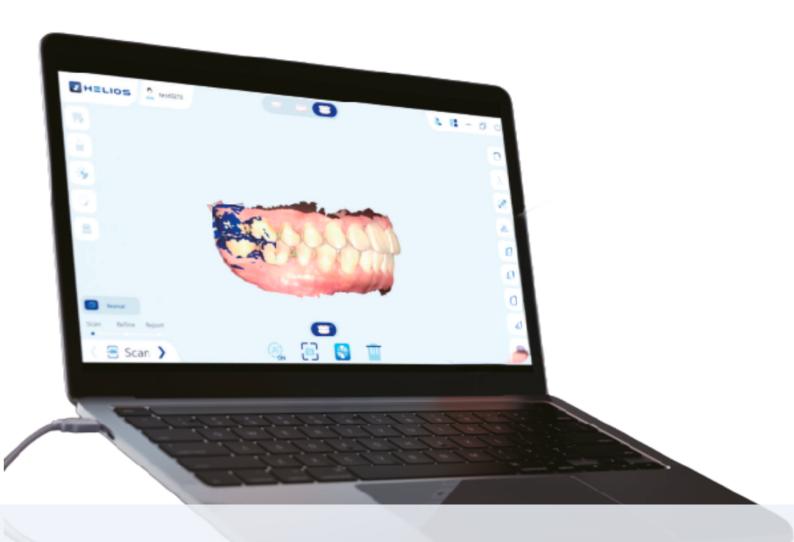



Choix de morsure automatique / manuelle



Optimisation du flux implantaire



Activer /
désactiver surface brillante



Analyse de l'occlusion



Détection des contre-dépouilles



Cartographie des textures



Mesure des dents



Dessin de la limite cervicale



Caméra Intra-orale



Mises-à-jour automatiques et gratuites du logiciel.



IA automatique



Permutation des mâchoires supérieure et inférieure



Stockage sur le Cloud : Communication directe avec le prothésiste. Stockage illimité des données.



SAV gratuit et rapide

H₌LIOS 6X Pro

Référence HELIOS6X

- · Pièce à main
- Socle
- ·1 embout S
- · 3 embouts L
- · Clé USB avec logiciel

Spécifications techniques		
Précision	Arcade complète	16.0 µm
	Zone de balayage	16 x 14 mm (L) - 12 x 12 mm (S)
Pièce à main	Dimensions	217 x 54 x 24 mm
	Poids	161,5 g
Embout	Dimensions de la pointe (partie avant)	22 x 18 mm (L) - 18.6 x 16.7 mm (S)
Connectivité	Longueur	1.8m / poignée amovible
	Туре	USB 3.0
Calibrage	Précision de balayage	Calibrage libre
	Calibrage des couleurs	Calibrage libre
Données	Format de sortie	STL/PLY/OBJ

Configuration système recommandée		
Processeur	Intel Core TM i7-13700 13 génération (ou supérieur)	
Mémoire	32 GB (ou supérieur) DDR4, fréquence 2666 MHz (ou supérieur)	
Disque dur	1TB (ou supérieur) SSD	
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB VRAM)	
Écran	15.6" FHD (1920x1080 ou supérieur)	
Autres	USB 3.0	
Système d'exploitation	Windows 10/11	
En option	Écran tactile	

Pour plus d'informations :





